

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig, weil sie Ihnen helfen wird, HYLO FRESH® richtig anzuwenden.

HYLO FRESH®

Natriumhyaluronat 0,3 mg/ml

Zur Linderung gereizter Augen

PRODUKTBESCHREIBUNG

HYLO FRESH® sind wässrige, sterile, konservierungsmittelfreie, phosphatfreie Augentropfen.

ZUSAMMENSETZUNG

1 ml HYLO FRESH® enthält 0,3 mg Natriumhyaluronat, Euphrasia-Urtinktur, Borsäure, Borax und Wasser für Injektionszwecke.

ZWECKBESTIMMUNG

Zur Linderung gereizter Augen.

MEDIZINISCHE INDIKATION

Trockene Augen

GEEIGNET FÜR

Kann von Erwachsenen und Kindern verwendet werden. Bitte beachten Sie die speziellen Dosierungsempfehlungen im Abschnitt „Dosierung“.

Eine andere Person kann bei der Anwendung des Produkts helfen, wenn es sich bei dem Patienten um ein Kind, eine ältere Person oder eine Person handelt, die das Produkt nicht selbst anwenden kann (z. B. aufgrund einer Verletzung, Krankheit oder eingeschränkter Mobilität).

Aufgrund vorliegender Erkenntnisse kann das Produkt während Schwangerschaft und Stillzeit angewandt werden. Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Augenarzt und beachten Sie die speziellen Dosierungsempfehlungen im Abschnitt „Dosierung“, wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Kann mit harten oder weichen Kontaktlinsen angewendet werden.



NUTZEN, LEISTUNG UND WIRKUNGSWEISE

Ungünstige Umweltbedingungen wie trockenes Klima, Klimaanlage, Zugluft, Luftverschmutzung und Sonnenlicht sowie längere Bildschirmzeiten, beispielsweise durch Fernsehen oder Arbeiten am Computer, oder das Tragen von Kontaktlinsen können die Augen reizen. Dies kann zu Symptomen wie Rötungen, Brennen, Juckreiz, Trockenheit, müden Augen oder Fremdkörpergefühl, Schwellungen der Lider oder übermäßigem Tränenfluss führen.

HYLO FRESH® enthält Natriumhyaluronat und Augentrost (Euphrasia officinalis), zwei natürliche Substanzen. Natriumhyaluronat bildet einen stabilen, langanhaltenden Schutzfilm auf der Augenoberfläche. Euphrasia wird in der traditionellen Volksmedizin zur Behandlung von Augenreizungen eingesetzt.

HYLO FRESH® befeuchtet die Augenoberfläche und hilft gereizte und trockene Augen bei Kindern und Erwachsenen zu beruhigen und zu lindern. HYLO FRESH® ist auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

GEGENANZEIGEN

HYLO FRESH® sollte nicht bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile angewendet werden.

NEBENWIRKUNGEN

Das Produkt ist konservierungsmittelfrei und dadurch auch bei längerer Anwendung besonders gut verträglich. In sehr seltenen Fällen wurde über unerwünschte Reaktionen wie Überempfindlichkeit, Brennen, Tränenfluss, Schmerzen, Fremdkörpergefühl oder andere vorübergehende lokale Reizungen berichtet, die nach Absetzen des Produktes abgeklungen sind. Unmittelbar nach dem Eintropfen der Lösung kann es zu vorübergehendem Schleiersehen kommen.

Falls während der Verwendung dieses Medizinprodukts oder als Folge seiner Verwendung ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller () und Ihrer nationalen Behörde.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

Wenn Ihre Symptome nach mehr als einer Woche der Anwendung des Produkts weiterhin bestehen oder sich verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Augenarzt, Apotheker oder Kontaktlinsenspezialisten.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie HYLO FRESH® gleichzeitig mit anderen Augentropfen verwenden. Verwenden Sie zuerst die Augentropfen und warten Sie mindestens 30 Minuten, bevor Sie HYLO FRESH® verwenden. HYLO FRESH® sollte zuletzt angewendet werden. Augensalben sollten in jedem Fall nach HYLO FRESH® angewendet werden. Warten Sie mindestens 30 Minuten zwischen den Anwendungen.

Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, warten Sie direkt nach dem Einsetzen der Linsen etwa 30 Minuten, bevor Sie HYLO FRESH® anwenden. So vermeiden Sie mögliche Unverträglichkeitsreaktionen, die durch Wechselwirkungen zwischen Ihrer Kontaktlinsenpfegelösung und HYLO FRESH® verursacht werden könnten.

HYLO FRESH® enthält geringe Mengen an Borsäure und Borax (Boratpuffer), die bei korrekter Anwendung gemäß der Gebrauchsanweisung unbedenklich sind.

Eine Flasche sollte stets nur von derselben Person verwendet werden ().

DOSIERUNG


Verwenden Sie das Produkt je nach Schwere Ihrer individuellen Symptome. Im Allgemeinen tropfen Sie dreimal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack jedes Auges. Wenn Sie das Produkt häufiger (z. B. mehr als 10mal täglich) anwenden oder wenn Ihre Beschwerden länger als eine Woche anhalten oder sich verschlimmern, suchen Sie Ihren Augenarzt oder Apotheker auf.

Bei Säuglingen und Kleinkindern (unter zwei Jahren) kann das Produkt bis zu dreimal täglich in jedes Auge getropft werden, bei Kindern über zwei Jahren bis zu fünfmal täglich in jedes Auge.

Während Schwangerschaft und Stillzeit sollte HYLO FRESH® nicht mehr als 5-mal täglich in jedes Auge getropft werden, da es Boratpuffer enthält.

Die Dauer der Anwendung des Produktes ist nicht beschränkt.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Versiegelung der Faltschachtel vor der ersten Anwendung unversehrt war ().

Das Produkt ist in eine spezielle COMOD-Flasche abgefüllt. Das ist ein Mehrdosenbehältnis mit gasfreiem Pumpsystem, in dem die Augentropfen ohne Konservierungsstoffe steril bleiben.



Die Handhabung wird im Folgenden gezeigt:

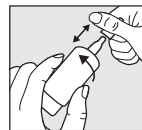


Bild 1: Nehmen Sie vor jedem Gebrauch die Kappe ab. Halten Sie dazu die Kappe, die die Tropferspitze schützt, knapp über der Flasche fest. Ziehen Sie mit Ihrer anderen Hand die Flasche mit einer Drehbewegung von der Kappe weg.

Hinweis: Vor der ersten Anwendung muss der Pumpmechanismus aktiviert werden. Drehen Sie dafür die Flasche auf den Kopf und drücken Sie wiederholt auf den Flaschenboden, bis der erste Tropfen an der Flaschenspitze austritt. Danach ist die Flasche für die folgenden Anwendungen bereit.



Bild 2: Halten Sie die Flasche mit der Tropferspitze nach unten, indem Sie den Daumen auf die Flaschenschulter und die anderen Finger auf den Flaschenboden legen.

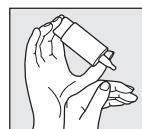


Bild 3: Stützen Sie die Hand mit der Flasche auf der freien Hand ab.



Bild 4: Vermeiden Sie beim Tropfen jeglichen Kontakt der Tropferspitze mit dem Auge oder der Haut. Legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie mit der freien Hand das Unterlid leicht vom Auge ab und drücken Sie kräftig und schnell in der Mitte auf den Flaschenboden. Dadurch wird der Mechanismus zur Entnahme eines einzigen Tropfens betätigt. Aufgrund der besonderen Ventiltchnik des COMOD-Systems ist die Größe und Geschwindigkeit des Tropfens auch bei sehr kräftigem Druck auf den Flaschenboden immer gleich. Schließen Sie nach dem Tropfen die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann.

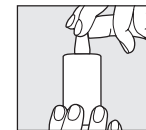


Bild 5: Achten Sie immer darauf, dass die Tropferspitze trocken ist, und setzen Sie die Kappe nach Gebrauch sofort wieder auf. Dadurch wird verhindert, dass Restflüssigkeit kristallisiert und die Tropferspitze verunreinigt.

Wenden Sie sich an den Hersteller (), Ihren Apotheker, Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten, wenn Sie Fragen zur korrekten Anwendung dieses Medizinprodukts haben.

10 ml Lösung entsprechen etwa 300 Tropfen.

Aus produktionstechnischen Gründen bleibt stets ein kleiner Flüssigkeitsrest am Gebrauchsende in der Flasche zurück.

LAGERUNG

Nicht über 25 °C lagern ( 25 °C).

Nach Anbruch der Flasche ist das Produkt 6 Monate verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums () nicht mehr anwenden.


Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reich- und Sichtweite von Kindern auf. Entsorgen Sie dieses Medizinprodukt über den Hausmüll entsprechend Ihrer nationalen Gesetzgebung. Diese Maßnahme trägt zum Schutz der Umwelt bei.


FOLGENDE PACKUNGSGRÖSSEN SIND ERHÄLTlich


10 ml Augentropfen

STAND DER INFORMATION

Oktober 2025

 URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Deutschland
www.ursapharm.de

 Deutschland:
URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken
Tel.: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88,
E-Mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

 Österreich:
URSAPHARM Ges.m.b.H., 3400 Klosterneuburg
Tel.: +43 2243/26006, Fax: +43 125 330 339 113,
E-Mail: office@ursapharm.at, www.hydro.at



Ihre Meinung zu unserem Produkt ist uns wichtig! Wir freuen uns, per Post oder via www.ursapharm.de von Ihnen zu hören.



Instructions for use

Please read this information carefully as it will help you to use HYLO FRESH® correctly.

HYLO FRESH®

Sodium hyaluronate 0.3 mg/ml

For relief of irritated eyes

PRODUCT DESCRIPTION

HYLO FRESH® are aqueous, sterile, preservative-free, phosphate-free eye drops.

COMPOSITION

1 ml HYLO FRESH® contains 0.3 mg sodium hyaluronate, Euphrasia-original mother tincture, boric acid, borax and water for injections.

INTENDED PURPOSE

For relief of irritated eyes.

MEDICAL INDICATION

Dry eye disease

SUITABLE FOR

Can be used by adults and children. Please see special dosage recommended in section "Dosage" below.

Another person may assist in the application of the product if the patient is a child, an elderly person or a person who is unable to use the product themselves (e.g., due to injury, illness or limited mobility).

Based on current knowledge, the product can be used during pregnancy or lactation. Please consult your eye doctor before use and see special dosage recommended in section "Dosage" below if you are pregnant or breastfeeding.

Can be used while wearing hard or soft contact lenses.

CLINICAL BENEFIT, PERFORMANCE AND EFFECTIVENESS

Adverse environmental conditions like a dry climate, air conditioning, draughts, air pollution and sunlight, as well as prolonged screen time, for example from watching television or working on a computer or wearing contact lenses can irritate the eyes. This can lead to symptoms such as redness, burning, itching, dryness, tired eyes or foreign body sensation, swelling of the lids or excessive tearing.

HYLO FRESH® contains sodium hyaluronate and eyebright (Euphrasia officinalis), two natural substances. Sodium hyaluronate forms a stable, long-lasting lubricating film on the surface of the eye. Euphrasia has been used in traditional folk medicine to treat eye irritations.

HYLO FRESH® moisturizes the eye surface and helps to sooth and relief irritated and dry eyes in children and adults. HYLO FRESH® also refreshes the eyes of people who wear contact lenses.


CONTRAINDICATIONS

Do not use HYLO FRESH® if you are hypersensitive to any of the ingredients.

SIDE EFFECTS

The product is preservative free and well tolerated even after prolonged use. In very rare cases, adverse reactions like hypersensitivity, burning or excessive tearing, pain, foreign body sensation or other transient local irritation have been reported which resolved when the product was discontinued.

Temporary blurred vision may occur immediately after application of the solution.

If any serious incident occurs during or as a result of the use of this product, please contact the manufacturer () and your competent authority.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

If your symptoms persist or get worse after more than a week of using the product, consult your eye doctor, pharmacist or contact lens specialist.

Take care when using HYLO FRESH® simultaneously with other eye drops. Apply eye drops first and wait at least 30 minutes before using HYLO FRESH®. HYLO FRESH® should be used last.

Eye ointments should, however, always be administered after using HYLO FRESH®. Wait at least 30 minutes between applications.

If you are wearing contact lenses, wait approximately 30 minutes after inserting the lenses before using HYLO FRESH® to avoid any possible incompatibility reactions due to interaction between your contact lens care solution and HYLO FRESH®.

HYLO FRESH® contains boric acid and borax (borate buffer) in small amounts that are safe if the product is used correctly according to the instructions for use.

One bottle should only be used by a single person ().

DOSAGE


Use the product as needed, depending on the severity of your individual symptoms. Generally, instil one drop in each eye three times a day. If you need to use the product more frequently (e.g. more than 10 times a day), or if your symptoms persist for more than a week or get worse, see your eye doctor or pharmacist.

In infants and young children (under two years old) the product can be used up to three times a day in each eye, and in children over two years old, up to five times a day in each eye.

During pregnancy and lactation HYLO FRESH® should not be used more than 5 times per day in each eye, because it contains borate buffer.


The product can be used for an unlimited period of time.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

Do not use the product if any part of the seal on the folding carton is broken or damaged before first use ().

The product is filled in a special COMOD bottle, a multi-dose container with an airless pump designed to keep the eye drops sterile without using preservatives.

The handling is shown in the following:

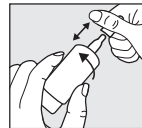

Step 1:

Remove cap before use.


For this purpose, hold the cap that protects the dropper tip right above the bottle. With your other hand, twist the bottle away from the cap.

Note: Before the first application, the pump mechanism must be activated. Turn the bottle upside down and press repeatedly on the bottom of the bottle until the first drop appears at the dropper tip. The bottle is now ready for further use.



Step 2:

Hold the bottle upside down and place your thumb on the shoulder of the bottle and the other fingers on the base of the bottle.

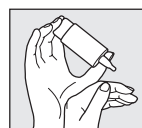

Step 3:


Support the hand holding the bottle with the other hand.



Step 4:


When applying the eye drops, avoid any contact between the dropper tip and your eye or skin.

Tilt your head back slightly and gently pull down your lower eyelid with your free hand. Press firmly and quickly on the bottom of the bottle. This activates the release mechanism to dispense a single drop. Due to the special COMOD valve system, the size and speed of each drop remain constant regardless of the pressure applied to the bottom of the bottle. Close your eye after application so that the solution is evenly distributed over the eye surface.

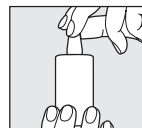

Step 5:

Always ensure that the dropper tip is dry and replace the cap immediately after use. This prevents residual liquid from crystallizing and contaminating the dropper tip.

Contact the manufacturer (), your pharmacist, eye doctor or contact lens specialist if you have any questions about the correct use of this medical device.

10 ml of solution correspond to approximately 300 drops.

For technical reasons, a small amount of product remains in the bottle at the end of use.

STORAGE

Do not store above 25 °C ( 25 °C).

The product can be used for 6 months after first opening.

Do not use beyond the expiry date ().


Keep the product out of the sight and reach of children. Dispose of this medical device with your household waste in accordance with local regulations. This will help to protect the environment.


THE FOLLOWING PACKAGING SIZES ARE AVAILABLE


10 ml eye drops

DATE OF INFORMATION

October 2025










 URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Germany
www.ursapharm.de

 in Germany:
URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken
Phone: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88,
e-mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

 in Austria:
URSAPHARM Ges.m.b.H., 3400 Klosterneuburg
Phone: +43 2243/26006, Fax: +43 125 330 339 113,
e-mail: office@ursapharm.at, www.hylo.at

Your opinion about our product is relevant for us! We are looking forward to get your feedback via mail or via www.ursapharm.de.

Symbol	Erklärung / Explanation
	Vertrieb / Distributor
	Medizinprodukt / Medical device
	CE-Kennzeichnung / CE mark
	Eindeutige Produktkennung / Unique Device Identifier printed on the folding carton.
	Sterilisiert mit aseptischem Verfahren / Sterilized using aseptic processing techniques
	Chargennummer / Lot number
	Herstelldatum [JJJJ-MM] / Date of manufacture [YYYY-MM]
	Gebrauchsanweisung befolgen / Consult instructions for use
	Enthält Gefahrstoffe / Contains hazardous substances